

HELST® НММ-400

Массажный матрас

Инструкция по эксплуатации

HELST – международный бренд потребительской электроники для дома и офиса, в котором идеально сочетаются передовые технологии, качественные материалы и продуманность использования.

Благодарим вас за выбор нашего продукта.

Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед использованием массажного устройства, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и оптимальную эффективность.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования!

- Массажное устройство соответствует признанным техническим принципам и новейшим нормам безопасности.
- Этот предмет НЕ является ИГРУШКОЙ. Допускается использование массажера детьми или людьми с ограниченными возможностями под наблюдением взрослых.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Никогда не используйте какие-либо источники питания, кроме стандартной розетки на 110-240 В.
- Любой возможный ремонт может выполняться только квалифицированным персоналом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт не допускаются по соображениям безопасности и приводят к потере гарантии.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Избегайте контакта устройства с водой, высокими температурами и прямыми солнечными лучами.
- Не используйте поврежденные кабели, вилки или незакрепленные розетки.
- Если вилки или шнуры повреждены, они должны быть заменены производителем, представителем сервисной службы или квалифицированным персоналом.
- В случае неисправности немедленно отключите устройство от сети.
- Не пользуйтесь массажером, если у вас есть кожные заболевания, открытые раны, воспаленные участки.
- Неправильное использование массажера исключает любую ответственность за ущерб.
- Не используйте это устройство во время вождения.
- Не используйте массажер во время сна.
- Во избежание чрезмерной стимуляции мышц рекомендуемое время массажа не должно превышать 15 минут за один раз.
- Массажер оснащен защитой от перегрева для безопасного использования.
- Не используйте этот продукт для лечения.

Предупреждение

ВНИМАНИЕ!

- От любого массажа, даже ручного, следует воздерживаться во время беременности или при наличии в зоне массажа одного или нескольких из следующих жалоб: недавние травмы, тромботические заболевания, всевозможные воспаления и отеки, а также доброкачественная или злокачественная опухоль. Перед проведением массажа рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Если у вас есть электрические вспомогательные средства, например, кардиостимуляторами, перед началом массажа обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Несоблюдение приведенных выше инструкций может считаться неправильным использованием продукта и может привести к серьезным травмам или ожогам.

Настройка и работа

1. Прикрепите массажер к креслу с помощью эластичных ремней или поместите его на диван-кровать или другую ровную горизонтальную поверхность.
2. Подключите кабель адаптера к соответствующему кабелю на матрасе.
3. Подключите адаптер к электрической розетке.
4. Включите устройство с помощью пульта управления.
5. Завершив сеанс массажа, поместите пульт управления в чехол сбоку подушки.

- Устройство автоматически выключится по истечении 15 минут работы.
- Вынимайте адаптер из розетки, когда он не используется.
- Не устанавливайте и не используйте массажер в ванной или других влажных помещениях.

! Внимание

- Вы должны давать своему телу некоторое время для отдыха. Чтобы избежать чрезмерного напряжения мышц, мы рекомендуем не превышать 15 минут непрерывного массажа за 1 раз и не использовать более 3 раз в день.

Уход и чистка

1. Не стирайте в стиральной машине и не погружайте массажер или адаптер в воду.
2. Всегда выключайте устройство перед чисткой и извлекайте адаптер из розетки чистыми сухими руками.
3. Массажер следует протереть слегка влажной тканью и тщательно высушить.
4. Не протирайте изделие спиртом или агрессивными химическими веществами, такими как растворитель или отбеливатель.
5. Храните вдали от источников тепла, огня или воздействия прямых солнечных лучей.
6. Не оказывайте чрезмерного давления или ударов на массажер / массажные головки.
7. Храните массажер в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
8. Избегайте контакта с острыми краями или заостренными предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность массажера.

Комплектация


Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. При отсутствии чего-либо обращайтесь к дилеру или на веб-сайт HELST. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Массажер – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации (у вас в руках) – 1 шт.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к производителю или представителю производителя.

Сохраните заводскую картонную коробку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

Использование массажера

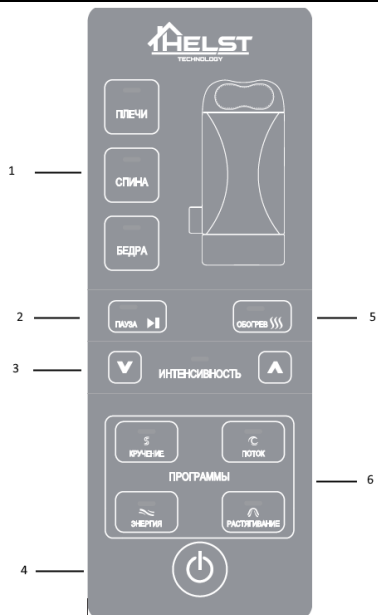

1. Кнопки зоны воздушного компрессионного массажа: вы можете выбрать отдельно плечи, спину и бедра.
2. Кнопка паузы: позволяет приостановить программу и возобновить ее с того места, на котором вы остановились.
3. Кнопка интенсивности: используйте стрелки, чтобы уменьшить или увеличить интенсивность.
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: включить или выключить устройство.
5. Кнопка обогрева: ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ функцию обогрева.
6. Кнопки программ массажа.

ПРОГРАММА КРУЧЕНИЕ: Динамичная программа, которая помогает уменьшить напряжение в плечах, бедрах и спине.

ПРОГРАММА ПОТОК: Последовательность растяжек для мягкой мобилизации позвоночника по всей длине.

ПРОГРАММА ЭНЕРГИЯ: Бодрящая программа, которая поможет повысить энергию.

ПРОГРАММА РАСТЯГИВАНИЕ: Всесторонняя растяжка для облегчения напряжения после длительного сидения.

Технические характеристики

НММ-400	
Наименование продукта	HELST НММ-400
Питание	АС 100-240V ~50/60Hz
Номинальное напряжение	12 В / 3 А
Номинальная мощность	36 Вт
Номинальное время работы:	15 минут
Размер	113 x 54 x11 см
Вес	3,5 кг

Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

HELST® и логотип HELST TECHNOLOGY, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТС ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер и организация, уполномоченная на принятие

претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900 Производитель: Хельст. Изготовитель: Нингбо Айвен Интеллидженд Технолджи Со., Лтд. Сделано в Китае

Условия гарантийного обслуживания

Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. **ВНИМАНИЕ:** Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжении деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.
9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).

10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.



Информация об устройстве

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Информация о продавце

Название торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

Адрес, e-mail _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.helst.ru

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.helst.ru