

HELST® HMC-600

Портативный массажер для спины

Инструкция по эксплуатации

HELST – международный бренд потребительской электроники для дома и офиса, в котором идеально сочетаются передовые технологии, качественные материалы и продуманность использования.

Благодарим вас за выбор нашего продукта.

Предупреждение

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Данное устройство предназначено для совершеннолетних пользователей.

При использовании массажера следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Избегайте использования устройства вблизи огня/воды, при высокой влажности.
- Прежде чем приступать к какой-либо программе массажа, проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что массаж не подвергнет ваш организм чрезмерной нагрузке.
- Нельзя использовать во время беременности, в послеоперационный период, а также людям и с эпилепсией, гемофилией, диабетом, большим раком, гипертонией, нервно-мышечными расстройствами и т. д.
- Не используйте массажер во время сна.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать/ремонтировать устройство.
- Не используйте массажер под подушкой или одеялом, так как данный способ огнеопасен.
- Не оставляйте прибор подключенным к сети, если он не используется.
- Не позволяйте детям пользоваться изделием без присмотра взрослых.
- Храните массажер в недоступном для детей месте. Не используйте данное устройство одновременно с каким-либо другим электрическим оборудованием (например, с другим устройством для электростимуляции мышц).
- Данный массажер не является медицинским или терапевтическим устройством.
- Чувствительным к теплу пользователям необходимо с осторожностью использовать режим нагрева, при его наличии.

Очистка


Перед очисткой обязательно отключите питание и отсоедините вилку. Используйте мягкую сухую ткань или слегка влажную ткань, чтобы протереть поверхность изделия.

- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Не мойте и не проливайте жидкость на изделие.
- Не используйте агрессивные жидкости, такие как бензол или растворитель, для очистки массажера, чтобы предотвратить повреждение и выцветания поверхности.
- Если массажер намок, прекратите его использование. Запрещается самостоятельно разбирать прибор. Оставьте сушить изделие естественным путем.

Обслуживание

- Держите изделие в чистоте и вдали от мест с высокой влажностью или высокой температурой, а также среды с летучими газами.
- Если массажер не будет использоваться в течение длительного периода времени, используйте пылезащитный чехол для предотвращения попадания пыли, а затем храните его в безопасном, сухом и прохладном месте.
- Не размещайте прибор рядом с огнем или прямыми солнечными лучами.
- Не ставьте тяжелые предметы на массажер.
- Обязательно выключайте питание и отсоединяйте его от сети, когда он не используется.
- Не используйте адаптер питания с напряжением выше 12 В, иначе это может повредить массажер.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещено разбирать и ремонтировать массажер самостоятельно.

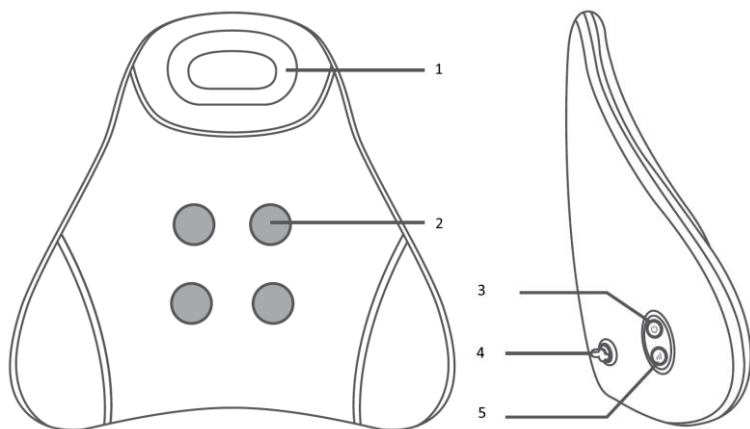

1. Ручка
2. Область перкуссионного массажа
3. Кнопка включения и выключения
4. Порт для зарядки
5. Кнопка регулировки скорости



Кнопка включения и выключения



Кнопка регулировки скорости

Комплектация

Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. При отсутствии чего-либо обращайтесь к дилеру или на веб-сайт HELST. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Массажер – 1 шт.
- Адаптер питания от сети – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации (у вас в руках) – 1 шт.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к производителю или представителю производителя.

Сохраните заводскую картонную коробку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

Использование массажера

1. Перед использованием, пожалуйста, проверьте, есть ли какие-либо повреждения на приборе.
2. Установите массажер на ровную поверхность, например, на диван или стул, зафиксируйте его перед использованием.



Кнопка включения и выключения

3. Кнопка включения и выключения:

- Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения в течение 2 секунд, чтобы запустить предустановленный режим: массажные ролики начнут работать в режиме перкуссионного массажа и массажа Шиацу, включая функцию прогрева.
- Нажмите кнопку включения и выключения еще раз - ролики перкуссионного массажа прекратят свою работу, ролики массажа Шиацу будут продолжать работать, сменив направление вращения в обратную сторону, функция прогрева так же будет работать.
- Нажмите кнопку включения и выключения в третий раз – ролики Шиацу продолжают работать в заданном режиме, функция прогрева будет отключена.
- Нажмите кнопку включения и выключения в третий раз, чтобы вернуться в режим исходный режим работы массажера.

Массажер автоматически выключится после примерно 15 минут непрерывной работы.

- 3.5. Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.



Кнопка регулировки скорости

4. Кнопка регулировки скорости.

- 4.1. Нажмите кнопку регулировки скорости, чтобы переключить скорость работы на среднюю или высокую скорость работы массажера.

Технические характеристики

НМС-600	
Наименование продукта	Портативный массажер для спины HELST НМС-600
Номинальное напряжение	13 В
Номинальная мощность	36 Вт
Номинальное время работы:	15 минут
Емкость батареи:	1800 mAh 11.1V
Время зарядки:	Около 150 минут, время работы от батареи около 50-150 минут (зависит от интенсивности использования)
Температура нагрева:	42°C
Размер массажера:	39 x 14 x 40 см
Размер упаковки:	40 x 15.5 x 42 см
Вес массажера:	2.8 кг

Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

HELST® и логотип HELST TECHNOLOGY, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТС ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер и организация, уполномоченная на принятие

претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900 Производитель: Хельст. Изготовитель: Нингбо Айвен Интеллидженд Технолджи Со., Лтд. Сделано в Китае

Условия гарантийного обслуживания

Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. **ВНИМАНИЕ:** Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжении деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.
9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).

10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.



Информация об устройстве

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Информация о продавце

Название торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

Адрес, e-mail _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.helst.ru

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.helst.ru